

CHARISMA®

Opal Flow



Charisma® Opal Flow

El composite fluido para todas las aplicaciones.

Seguridad y fuerza combinadas

Charisma Opal Flow es el complemento ideal de los composites Charisma. Gracias a su viscosidad controlable los casos mínimamente invasivos se vuelven más sencillos. Charisma Opal Flow tiene radio-opacidad para diagnósticos seguros y un manejo sencillo. Charisma Opal Flow es sinónimo de radiopacidad segura para el diagnóstico y fácil manejo. Con la combinación de Charisma Opal Flow con nuestros composites Charisma usted obtiene todo lo que necesita para realizar restauraciones seguras y duraderas.


Salud bucal en las mejores manos.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Charisma® Opal Flow – Sus beneficios de un vistazo.

- Excelentes propiedades de manejo:** Charisma Opal Flow crea una superficie uniforme y lisa en las zonas de la cavidad que son de difícil acceso. Esta es la base perfecta para composites con mayor viscosidad como los de la familia Charisma. El diseño de la jeringa Charisma Opal Flow asegura que el material pueda aplicarse fácilmente y de una forma confiable. Se obtienen resultados altamente estéticos en sólo unos pasos. El material mantiene su forma y posición después de la aplicación. Sólo fluye cuando se aplica con un instrumento gracias a sus características tixotrópicas. Eso hace que sea la mejor opción para muchas indicaciones.
- Diagnóstico seguro:** El relleno de composite se distingue fácilmente de la estructura residual del diente en radiografías debido a sus excelentes propiedades de radio-opacidad. Charisma Opal flow le asegura un diagnóstico óptimo y fiable.
- Restauraciones naturalmente perfectas y duraderas:** Charisma Opal Flow se distingue por una combinación única de alta resistencia a la flexión y baja contracción. Esto hace que la obturación sea más resistente y duradera. El sistema compacto con sus 7 colores puede combinarse con todos los materiales compuestos a base de acrilato disponibles comercialmente.
- Indicaciones**
 - Sellado de fisuras
 - Obturaciones Clase V
 - Como base de cavidades Clase I y II
 - Obturaciones de invasión mínima Clase III
 - Obturaciones de invasión mínima Clase I y II en áreas no sujetas a fuerzas masticatorias
 - Pequeñas reparaciones de restauraciones directas e indirectas en combinación con un adhesivo apropiado

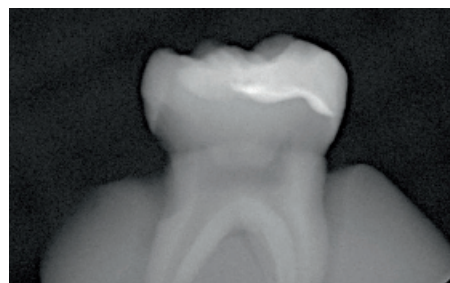

Excelente resistencia, baja contracción

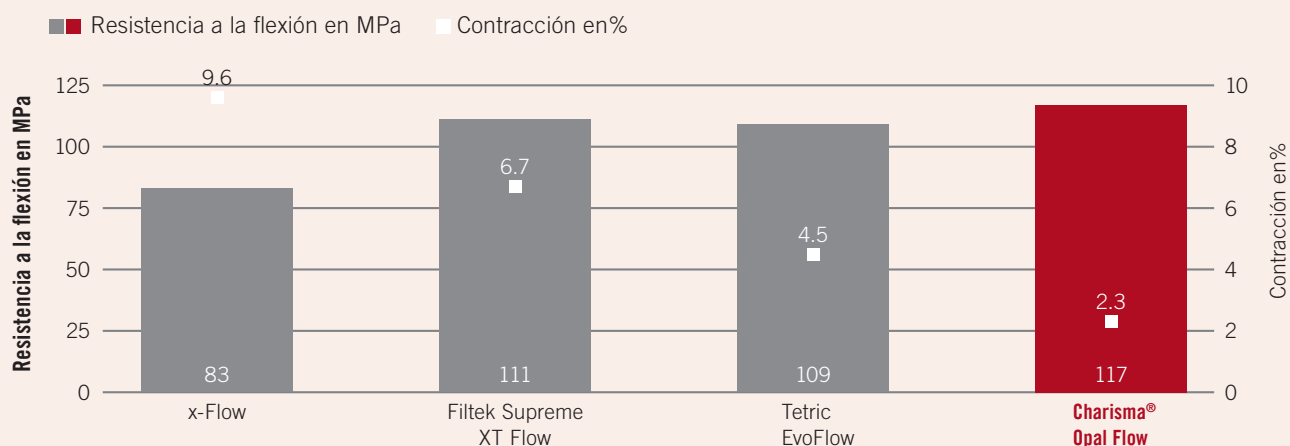

Fuente: Heraeus Kulzer R&D, Alemania. Datos en archivo. Documentación disponible



Código:	Artículo:	Contenido:
66043422	Charisma® Opal Flow Assortment	4 x 1.8g (A1, A2, A3, Baseline)
	Charisma® Opal Flow Syringe	1 X 1.8g (A1, A2, A3, A4, B2, OM, Baseline)

Kulzer México S.A. de C.V.
 Tel. (55) 5531-5549
 Homero 527 int. 301-302
 Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
 CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
 Instagram: kulzermexico
 Facebook: KulzerMexico
 Youtube: Kulzer Latinoamérica
 contacto-hkxm@kulzer-dental.com